GLOBUS ACTIVA 700


PRODUIT POUR LA BEAUTE E POUR LA FORME PHYSIQUE, CREE AVEC DES PROGRAMMES SPECIFIQUES POUR LE RAFFERMISSEMENT, LA TONIFICATION ET POUR LE RAJEUNISSEMENT. AVEC LA TETE G-TRODE EN DOTATION, L'ELECTROSTIMULATEUR ACTIVA 700 EST UN HAUTE DE GAMME DE L'ELECTROSTIMULATION GLOBUS.

DIMENSIONS

100x160x35 mm

L'électrostimulateur Globus Activa 700 est spécialement conçu pour les personnes qui aiment entretenir leur corps grâce à ses programmes spécifiques et innovants dédiés aux soins esthétiques et aux performances sportives. Accompagné de son outil de lifting G-Trode, l'Activa 700 vous donne accès aux meilleurs outils d'électrostimulation pour régénérer et raffermir le visage et le corps.

Doté des dernières avancées technologiques de GLOBUS, l'Activa 700 conviendra parfaitement aux professionnels de santé et aux particuliers qui recherchent un appareil d'électrostimulation facile d'utilisation et permettant une prise en main rapide. Doté de multiples technologies innovantes, cet électrostimulateur vous apportent différents avantages

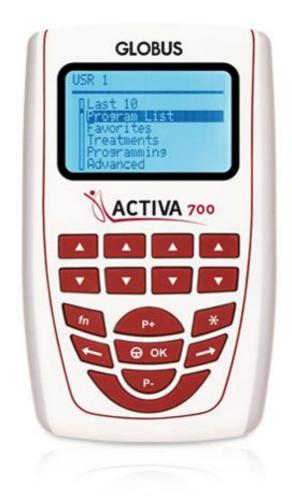

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille de la zone visible 2,6"

Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

Fréquence

0,3-150Hz *

Largeur d'impulsion

40-450µs*

Puissance

0-120mA chaque canal

Alimentation

Batterie rechargeable

Taille

mm 100x160x35


Poids

gr 454

* selon le type de courant

EQUIPEMENT

- · 1 Sacoche de transport
- · 1 Électrostimulateur ACTIVA 700
- · 1 Tête G-Trode
- \cdot 4 Câbles pour connecter les électrodes
- · 2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse ·
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- · 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- · 1 Flacon de gel
- · 1 Chargeur
- · 1 Manuel d'utilisation

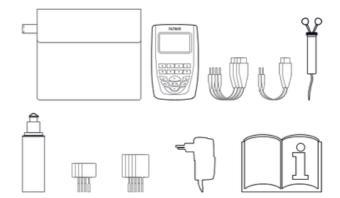



GLOBUS ACTIVA 700

PROGRAMMES

Raffermissement

Raffermissement Bio-

Pulse Modelage

Modelage Bio-Pulse

Tonification

Augmentation masse

Modelage corps

Définition

Jogging

Fitness anaérobie

Fitness gérobie

Prévention crampes

BEAUTÉ

Drainage

Drainage Bio-Pulse

Lipolyse

Lipolyse post-accouchement

Massage relax Bio-Pulse

Massage tonifiant

Massage énergétique

Massage connectif

Bras gonflés

Capillarisation du visage

Définition

Ligne

Amélioration du ton de la peau

Drainage post-accouchement

Raffermissement postaccouchement

Raffermissement du sein

Modelage du sein

SPORT

Capillarisation

Échauffement

Echauffement pré-compétition

Récupération active

Force maximale

Force résistante

Force explosive Réactivité

Récupération post-compétition

Hypertrophie

SPORTS SPÉCIAUX

Course

Ski

Golf

RÉHABILITATION

Atrophie du quadric. (avec prot. au genou)

Rétablissement post-intervention LCA

Prévention Subluxation de l'épaule

TENS / DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle

Tens antalgique modulée

Tens des endorphines

Douleurs menstruelles

Douleur chronique

Cervicaux

Douleur musculaire

Doleur genou

Périarthrite scapulo-humérale

Lombalgie chronique

Bursites - Tendinites

Ostéarthrite

G-PULSE

Micro-lifting du sein

Micro-lifting du décolleté Micro-

lifting du visage

Élasticité de la peau

Effets inesthétiques la

cellulite Collagène BioSkin

Rides

Rides des yeux

Rides de l'expression

Vergetures

Renforcement des ongles

Bio peelina

Hématome

MICRO-COURANTS

Epicondilite

Périarthrite s.h.

Contusion

Sciatalaie

Lombalgie

Douleur aiguë Douleur articulaire

Torticolis

Coup de lapin

Entorse à l'épaule

Entorse au genou

Inflammation tendineuse

INCONTINENCE

Incontinence mixte

Incontinence d'effort

Incontinence par urgence

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
La liste des programmes "35" comprend 36 combinaisons de paramètres.
Les programmes "35" se caractérisent par un

Les programmes "35" se caracterisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées.



STIM LOCK



FONCTION 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCRO STIM



WORK TIME



BATTERIE RECHARGEABLE



TENS



MENS





RUN TIME



LAST 10



FAVORIS



MULTI USER



PROGRAMMABLE

