

GENESY 600

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 149 PROGRAMMES

PRODUIT PROFESSIONNEL À QUATRE CANAUX POUR LES UTILISATEURS EXIGEANTS ET POUR LES PROFESSIONNELS DE LA REHABILITATION.

53 SPORT | 29 FITNESS | 20 DOULEUR | 12 MICRO-COURANTS | 12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 11 REHAB
7 ACTION NOW | 3 DENÉRVÉ | 1 INCONTINENCE | 1 IONOPHORÈSE


TECHNICAL FEATURES

Écran
Taille de la zone visible 2,6"
Canaux
4 indépendants (8 Électrodes)
Fréquence
0,3-150Hz *
Largeur d'impulsion
40-450µs *
Puissance
0-120mA chaque canal
Alimentation
Batterie rechargeable
Taille
mm 100x160x35
Poids
gr 454

* selon le type de courant

EQUIPEMENT

- 1 Sacochette de transport
- 1 Électrostimulateur GENESY 600
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation

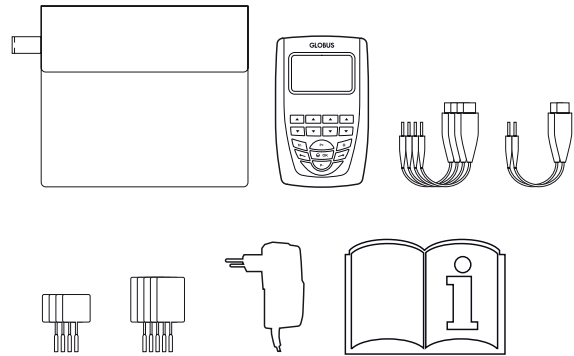

CE
0476



TENS



EMS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FAVORIS



MULTI USER



PROGRAMMABLE



STIM LOCK



FONCTION 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCHRO STIM



WORK TIME



BATTERIE RECHARGEABLE

GENESY 600

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 149 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

RÉHABILITATION

Cheville gonflés

Atrophie

Hémiplégie membres supérieurs

Hémiplégie membres inférieurs

Rétablissement post-intervention LCA

Rétablissement fonctionnel

Rééducation cheville

Rééducation jambe

Spasmes musculaires

Prévention subluxation de l'épaule

Renforcement vaste

Agoniste/Antagoniste

Recherche points moteurs

Renforcement musculaire

DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle

Tens antalgique basse fréquence

Douleurs menstruelles

Tens antalgique modulée

Douleur genou

Tens des endorphines

Douleur post-intervention

Douleur chronique

Syndrome scapulo-humérale

Canal carpien

Douleur trapèze

Tendinite coiffe rotateurs

Douleur musculaire

Sciatgie

Lombalgie chronique

Douleurs cervicales

Bursites – tendinites

Fractures osseuses

Épicondylite

Ostéoarthrite

IONOPHORÈSE

Ionophorèse

INCONTINENCE

Incontinence mixte

MICRO-COURANTS

Épicondylite

Périarthrite scapulo-humérale

Contusion

Sciatgie

Lombalgie

Douleur aiguë

Douleur articulaire

Torticolis

Coup de lapin

Entorse à l'épaule

Entorse genou

Inflammation tendineuse

DENÉRVÉ

Triangulaire (bas niveau dénervation)

Trapézoïdal (moyen niveau dénervation)

Rectangulaire (haut niveau dénervation)

SPORT

Capillarisation

Echauffement

Echauffement pre-compétition

Récupération active

Force maximale

Force résistante

Force explosive

Résistance Aérobie

Réactivité

Récupération post-compétition

Décontracturant

Hypertrophie

FITNESS

Raffermissment

Raffermissment Bio-Pulse

Modelage

Modelage Bio-Pulse

Tonification

Augmentation masse

Modelage corps

Définition

Jogging

Fitness anaérobie

Fitness aérobie

Prévention crampes

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La liste des programmes "3S" comprend 12 combinaisons de paramètres.

Les programmes "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées.

ACTION NOW

La liste de programmes Action Now comprend 7 combinaisons de paramètres.

Les programmes Action Now sont particulièrement utiles pour associer et synchroniser la stimulation électrique avec une action volontaire.